

Die NEUE SacroLoc®

BEWÄHRTE WIRKSAMKEIT MIT ERHÖHTEM KOMFORT

BAUERFEIND.COM


WIRKWEISE

SacroLoc stabilisiert das Becken und entlastet die Iliosakralgelenke. Die zirkuläre Kompression durch das elastische Netzmaterial und die zwei Zuggurte der Orthese bewirkt eine Aufrichtung des Beckens und entlastet den lokalen Bandapparat. Die Intensität der Wirkung kann über die Zuggurte individuell reguliert werden. Zwei dorsale Pelotten werden über das patentierte Zuggurtsystem passgenau auf den Iliosakralgelenken in Position gebracht. Bei Bewegung üben Sie einen Massageeffekt aus und verstärken die entlastende Wirkung. Ihre Massageknöpfe wirken dann gezielt auf Triggerpunkte und auf Ansätze der stabilisierenden Bänder, Sehnen und Muskeln ein. Das fördert die Durchblutung, lindert Schmerzen und löst Verspannungen im lumbosakralen Bereich.

- **lindert gezielt Schmerzen**
mittels zwei Massagepelotten auf den Iliosakralgelenken, die präzise positioniert werden können
- **passgenauer Sitz**
auch in der Bewegung, durch elastisches Netzmaterial und anatomische Formung
- **entlastet sofort**
durch zirkuläre Kompression mittels individuell einstellbarer Zuggurte
- **leichtes Anlegen**
durch praktischen Klettverschluss mit breiten Fingerschlaufen
- **einzigartiger Tragekomfort**
durch atmungsaktive Netzmaterialien und schmalen, flachen Verschluss mit weichen Kanten

INDIKATIONEN

- Erkrankungen des Iliosakralgelenks (ISG-Syndrom, ISG-Arthrose, ISG-Instabilität)
- Beckenringinstabilität, z.B. Symphysensprengung und -lockerung
- Iliosakralgelenk-Blockierung (akut und prophylaktisch)
- Myalgien und Tendopathien der Beckenregion
- Gefügestörung nach Spondylodesen (im Übergang L5-S1)
- Konservative Behandlung nach Beckenfrakturen

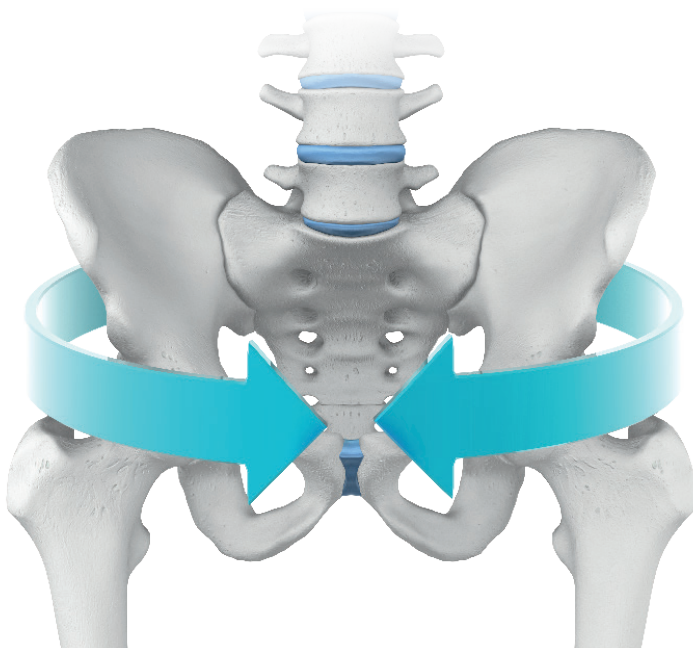

INNOVATIVER CHARAKTER

- **Grundbandage aus luftig-elastischem Netzgewirk**
hoher Tragekomfort vor allem durch Atmungsaktivität, Anschließbarkeit und Positionsstabilität in Bewegung
- **Gurte aus Monofilband mit patentierter Führung**
atmungsaktive Gurte werden dorsal von außen nach innen umgelenkt, die Massagepelotten sind direkt auf dem Innenteil der Gurte fixiert und werden so direkt angesteuert

Die Kombination aus neuer Bandage und neuer Gurtführung resultiert in einer nachgewiesenen Wirkung:

- Entlastung der Bänder (insb. Lig. sacrotuberale & sacrospinale)
- Einschränkung der Beckennutation